


SOFTWARE PRO OBSLUHU LOGGEROVÉ FUNKCE

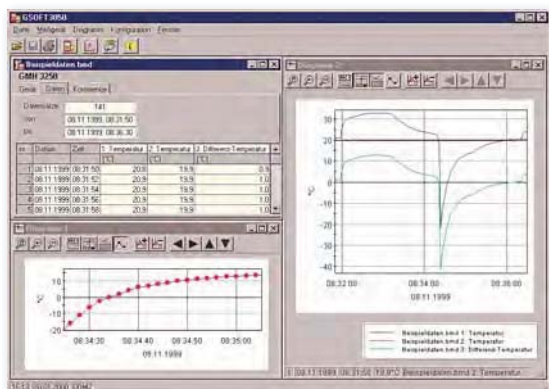

VÝHODY:

- o ovládání loggerové funkce
- o zobrazení grafů
- o exportní funkce

GSOFT 3050

obj. č. 601336

software pro přístroje GMH 3xxx a GMH 5xxx s datovým loggerem

Všeobecně:

Software pro ovládání loggerové funkce (start, stop, načítání a zobrazení naměřených dat) z přístrojů řad GMH 3xxx a GMH 5xxx vybavených datovým loggerem. Naměřená data mohou být vizualizována, ukládána a připravována k dalšímu zpracování.

Použití:

Seřizování topných systémů, laboratorní zkoušky, zkušebny a mobilní sběr dat.

Technické údaje:

Provedení programu: aplikace s uživatelskou plochou**Ukládání dat:** soubor (binární)**Exportní formát:** *.csv**Jazykové mutace:** německá
anglická
francouzská
česká**Řízení přístupu:** -**Vzdálený přístup:** -**Vyhlašování alarmů:** -**Přístroje:** řada GMH 3xxx (přes konvertory GRS 3100 nebo USB 3100N)
řada GMH 5xxx (přes konvertor USB 5100)**Interval záznamu:** závislý na typu přístroje / loggeru**Live zobrazení:** ne**Načítání dat loggeru:** ano**Systémové požadavky:** OS Windows 7 SP1 a vyšší (32 nebo 64 Bit)
(nelze provozovat pod operačními systémy Windows RT a Windows pro procesory ARM nebo Intel Itanium)**Rozsah dodávky:** DVD, tištěný návod

PROPOJOVACÍ SOFTWARE

GMH 3000-DLL
(knihovna Windows)GDU5B 1000-DLL
(knihovna Windows)

Popis protokolu (zdarma)

GMH 3xxx, GMH 5xxx	•		•
EASYBus a EASYLog			•
TLogg			•
GDU5B 1000		•	
start, stop, vymazání a načtení dat loggeru	•		
programovací příklady	Visual Studio, Excel VBA	Visual Studio	
placená licence	•	•	

GMH 3000.DLL

obj. č. 603027

knihovna funkcí OS MS Windows pro vlastní tvorbu programů pro komunikaci GMH 3xxx / 5xxx <-> PC přes sériové rozhraní